

# Iszapkeverő berendezés

## RH - IK

Iszap előkészítésére, felmelegítésére, sterilizálására szolgáló berendezés

100-150-200-300, \*500L



Az iszap poralakban vagy nedvesített módon is betölthető a tartályba, majd a kívánt sűrűség beállítása után a berendezés automatikusan elvégzi az alábbi funkciókat:

- felfűtés
- hőntartás (sterilizés)
- hűtés
- felhasználói hőntartás

Teljes ciklusidő: 11 óra (200 liter esetén)

### A készülék részei:

#### 1. Keverőtartály:

- Hármás köpennyel van ellátva a fűtéshez
- Csatlakozások a hidegvízhez (hűtővíz)
- Kifolyócsanak az iszap számára
- Betöltőnyílás
- Stabil, három láb


#### 2. Meghajtómotor:

- Függőleges elrendezésű, áttételezett kivitel, bontható meghajtó tengely

#### 3. Elektronikus vezérlőegység:

(biztosítja az automatikus vagy kézi vezérlést)


- A keveréshez a motor ki-be kapcsolása
- A fűtéshez kívánt hőfok beállítása
- A fűtéshez a szükséges felhasználási hőmérséklet beállítása

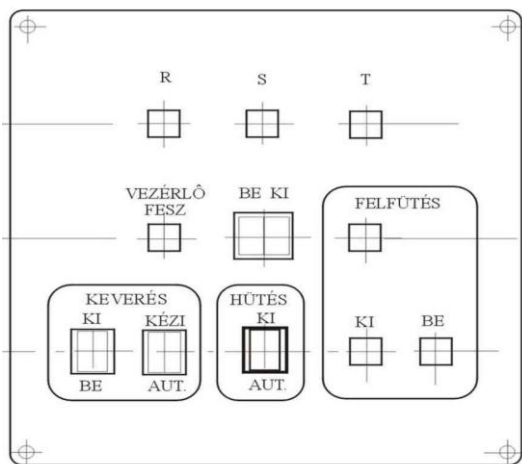

### Külön rendelhető tartozékok:

- Iszapszállító kocsi
- Iszapkezelő ágy

A Készülék teljesen rozsdamentes anyagból készült, robusztus kivitelű, mely hosszú élettartamot és biztonságos működést biztosít.

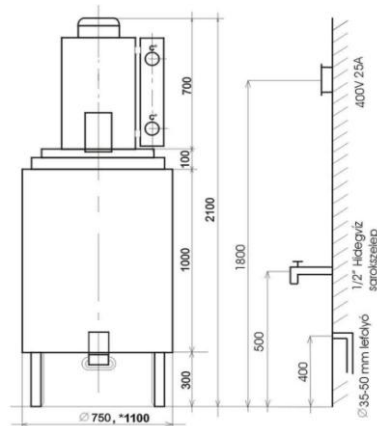

### Műszaki adatok

Meghajtómotor  
Teljesítmény: P= 1,5kW \*3kW  
Fordulatszám: n= 1410/31,5 ford/perc  
Feszültség: U=400V/50Hz

Fűtőteljesítmény: 6 kW, \*8 kW  
Hőntartó teljesítmény: 2 kW (szakaszos)  
Betöltő magasság: 1300 mm  
Kiöntő magasság: 450 mm

Fűtőközeg: Olaj  
Hűtés: Hálózati hidegvíz csatlakozás 1/2"

Érintésvédelem: 1 é.v.o. földelt

Tömeg: cca: 350 kg, \*400 kg

Tömeg feltöltött állapotban: cca: 500-700 kg, \*900 kg

### OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776

Internet: <http://www.omszov-medic.hu>

E-mail: [info@omszov-medic.hu](mailto:info@omszov-medic.hu)

